

مددجوی عزیز

در این پمفلت سعی شده است آموزش های لازم در رابطه با وکیوم تراپی به شما داده می شود، امید که با رعایت این نکات سلامتی خود را حفظ کرده و بهبود بخشید.

مقدمه:

وکیوم تراپی یا دستگاه درمان فشار منفی زخم یک پانسمان تخصصی می باشد که با کمک دستگاه خاصی، تجهیزات و مسائل تکنیکی باعث کاهش ترشحات زخم، مدیریت عفونت زخم، بهبود خونرسانی می گردد و منجر به تسریع بهبود زخم و کاهش احتمال عفونت می گردد.

آشنایی با دستگاه وکیوم تراپی ((NPWT))

دستگاه شامل قسمت های ذیل می باشد:
دستگاه وکیوم: یک دستگاه مجهز به باطری می باشد که بصورت مداوم و ۲۴ ساعته به بیمار و زخم ایشان متصل است و فرآیند درمان پانسمان مداوم می باشد و دستگاه به هیچ وجه نباید خاموش گردد.
مخزن: محل نگهداری موقت ترشحات می باشد.

نکته: زمان رسیدن حجم مخزن به ۶۰۰ CC باید تعویض گردد.

فوم پانسمان وکیوم (کیت پانسمان):

فومی سیاه رنگ از جنس پلی آرتان می باشد و هر جلسه جهت تعویض پانسمان ضرورت دارد.
چسب وکیوم: چسب ضد آب می باشد ولی به محض خیس شدن یا خاموش شدن طولانی دستگاه باز می شود.
خمیر اکینی یا خمیر وکیوم

مهمترین سوالات در خصوص وکیوم تراپی

چه مدت وکیوم تراپی لازم است؟

براساس شدت زخم و توانایی بدن بیمار در ترمیم زخم و بیماری های همراه دارد. تصمیم گیری براساس این موارد با نظر پزشک معالج و کارشناس زخم شما می باشد ولی تا زمانی که زخم ترشح زیاد دارد و هنوز بستر زخم آماده پوست سازی نیست، وکیوم لازم است.

تعویض وکیوم (پانسمان) چگونه می باشد؟

تعویض پانسمان وکیوم هر ۴۸ تا ۷۲ ساعت باید انجام گیرد (کمتر از ۳ بار در هفته نباید باشد). در زخم های عفونی ممکن است هر ۲۴ ساعت وکیوم تعویض شود ولی تصمیم گیری قطعی با نظر پزشک معالج و کارشناس زخم خواهد بود.

آیا پانسمان وکیوم باعث درد می گردد؟

ممکن است تعویض پانسمان بعضی از زخم ها، تجربه خوبی برای بیمار نباشد. در واقع تعویض هر نوع پانسمان چه وکیوم و یا پانسمان های ساده برای بیمار می تواند دردناک باشد. لذا پزشک معالج بسته به نوع زخم داروهای آرام بخش و مسکن تجویز می کند و بیمار نباید نگران این موضوع باشد.

نکته: وکیوم تراپی درد ندارد و باعث کاهش درد خواهد شد.

آیا وکیوم تراپی ایمن (Safe) می باشد؟

بله. وکیوم تراپی برای حدود ۹ میلیون بیمار تا کنون در سطح جهان مفید بوده است این روش درمان کنترل شده و کاملاً ایمن می باشد.

آیا با وکیوم می توان فعالیت داشت؟

بله. یکی از مهمترین نکات و امتیازات این دستگاه حفظ فعالیت بیمار می باشد



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

خودمراقبتی در پانسمان و کیوم



تهیه کننده: فاطمه گلستانی

سوپروایزر آموزش سلامت


زیر نظر:

دکتر روح اله امانی

(فوق تخصص جراحی عروق و درمانهای اندوواسکولار،

عضو هیئت علمی دانشگاه)

تاریخ تولید: بهار ۱۴۰۵

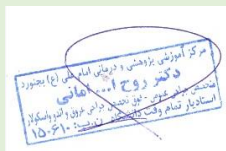

در صورت داشتن علائم ذیل به کارشناس زخم اطلاع دهید:

۱- خاموش شدن دستگاه

۲- تب

۳- خونریزی فعال: یعنی مخزن دستگاه طی مدت کوتاه پر از

خون شود.



بیمارستان امام علی (ع)

بجنورد، خیابان شهریار، مقابل دانشگاه آزاد

در صورت هر گونه سوال می توانید در ساعات اداری با شماره

تلفنهای زیر تماس بگیرید:

تلفن: ۰۵۸۳۱۵۱۱۶۰۷

جهت دریافت این فایل آموزشی به سایت بیمارستان به آدرس زیر

مراجعه کنید:

WWW.NKUMS.AC.IR

مهمترین هشدارهای دستگاه شامل موارد ذیل می

باشد:

هشدارهای دستگاه چیست؟

پر شدن مخزن (Full of Canister): زمانی که حجم

مخزن بیشتر از ۶۰۰ سی سی شد دستگاه stop می شود و

از کار می ایستد و باید مخزن تعویض گردد.

هشدار Leak یا نشت: زمانی که دستگاه و کیوم از محل

زخم نشت دارد و یا چسب ها باز شده است.

هشدار باتری: زمان خالی شدن یا کم شدن باتری، دستگاه

باید فوراً به برق وصل گردد.

نکته مهم: چنانچه خط سبز رنگ روی مانیتور

دستگاه، پر نمی شود و روی صفر باشد به

کارشناس زخم خود اطلاع دهید.